


GC-Fingerprint, GC-MS-Screening

Im Gegensatz zu gezielten Analysen (engl. target analysis) wie zum Beispiel bei der Purge-and-Trap-Methode nach EPA 524.2 (S. 54) wird bei Fingerprint- und Screening-Analysen nach unbekanntem Substanzen oder Substanzgemischen gesucht (nontarget analysis). Zuerst werden die organischen Substanzen aus der Probe extrahiert und danach gaschromatografisch aufgetrennt. Die Substanzen werden dann entweder mit einer Kombination von Flam-

men-ionisation und Electron-Capture (FID/ ECD) oder mit einem Massenspektrometer (MS) detektiert und aufgezeichnet. Für die GC-Fingerprint Untersuchung wird das aufgezeichnete Chromatogramm qualitativ ausgewertet. Bei der MS-Aufzeichnung kann anschliessend ein Vergleich des Massenspektrums mit einer Spektrenbibliothek durchgeführt werden. Im Idealfall resultiert eine genaue Identifikation einzelner Substanzen.

Die Bachema AG bietet drei verschiedene non-target Methoden an, welche nachfolgend detaillierter beschrieben sind. Allen drei Methoden gemeinsam ist, dass sie sich auf gaschromatografisch erfassbare flüchtige bis schwerflüchtige Substanzen beschränken.

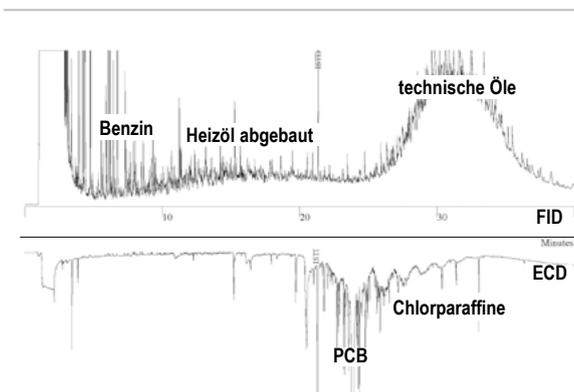


FID- und ECD-Chromatogramm (unten) einer kontaminierten Bodenprobe

GC-Fingerprint

Bei dieser Methode wird ein Extrakt der Probe mittels Gaschromatographie aufgetrennt und mit FID und ECD detektiert. Der GC-Fingerprint eignet sich besonders für Kontaminationen im Altlastenbereich. Bei Kohlenwasserstoff-Belastungen kann die Art der Verunreinigung typisiert werden (Benzin, Heizöl, Hydrauliköl, Teeröl inkl. PAK, Biodiesel usw.). Mit dem ECD-Detektor können chlorierte Lösungsmittel, PCB, Chlorparaffine und Phthalate nachgewiesen werden. Der Untersuchungsbericht der Bachema enthält jeweils eine qualitative Auswertung des Chromatogramms.

Preis in Fr.	
GC-Fingerprint GCFW, GCFF	180.-
Bei Feststoffen: Aufbereitung	50.-

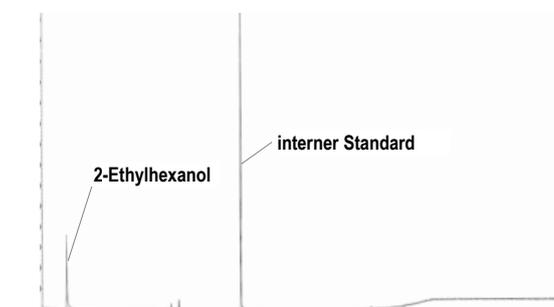


Chromatogramm einer beanstandeten Trinkwasserprobe

GC-MS-Analyse mit Identifikation

Bei dieser Methode wird ein Extrakt der Probe mittels Gaschromatographie aufgetrennt und mit dem Massenspektrometer (MS) detektiert. Von jeder aufgezeichneten Substanz wird ein Massenspektrum aufgezeichnet, welches mit Spektrenbibliotheken verglichen wird. Im Idealfall resultiert eine genaue Identifikation der Substanz. Die GC-MS-Analyse mit Identifikation eignet sich für gezielte, fallabhängige Abklärungen, z.B. wenn einzelne Signale im oben beschriebenen GC-Fingerprint genauer identifiziert werden sollen. Der Untersuchungsbericht der Bachema enthält jeweils eine detaillierte Auswertung des Chromatogramms mit halbquantitativen Konzentrations-schätzungen.

Preis in Fr.	
GC-MS-Identifikation mit Identifikation	200.- / Std. Aufwand

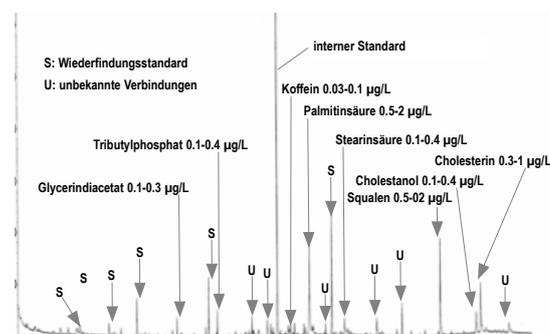

Chromatogramm einer Flusswasserprobe, welche wenige hundert Meter unterhalb des Auslaufs einer Kläranlage entnommen wurde.

GC-MS-Screening für Wasserproben

Diese Methode ist eine Weiterentwicklung der GC-MS-Analyse mit Identifikation. Im Unterschied dazu werden zwei Extraktionen bei unterschiedlichem pH-Wert durchgeführt. So werden saure und basische Substanzen wie Phenole und Aniline besser erfasst. Im Weiteren wird stärker angereichert als bei den oben genannten Analysen. Die Auswertung beinhaltet eine aufwändige Datenaufbereitung (Spektrendeconvolution, Wiederfindungsberechnung u.a.), und eine halb-quantitative Abschätzung der Konzentration. Das GC-MS-Screening eignet sich für den Spurenbereich (ca. 0.1 bis 1 µg/L), z.B. für schwach belastetes Grundwasser. Weil die Methode hoch empfindlich ist, stösst sie bei stärker kontaminierten Proben schnell an ihre Grenzen. Im Weiteren muss damit gerechnet werden, dass viele Substanzen nicht identifiziert werden können (siehe Beispiel links). Der Untersuchungsbericht der Bachema enthält jeweils eine detaillierte Auswertung des Chromatogramms mit halbquantitativen Konzentrations-schätzungen.

Preis in Fr.	
GC-MS-Screening	950.-
Identifikation unpolarer-mittelpolarer GC-gängiger Verbindungen	